

El sistema Mark 7 Arterion™ ofrece múltiples configuraciones para la máxima flexibilidad de configuración



Pedestal integrado
La función y el estilo del pedestal integrado fueron totalmente rediseñados.



Montaje de la mesa
El pequeño aditamento de suministro de energía permite flexibilidad de montaje - bajo de la mesa, en la sala de control, en el almacén.



Pedestal autónomo
Ideal para mover la cabeza del inyector y fuera de la mesa cuando no se necesita.



Sistema de suspensión en contrapeso
El sistema de montaje en el techo permite que la cabeza del inyector se mueva con facilidad para realizar las inyecciones.

Opción para todos los sistemas:

Conservador de calor

Conserva constante la temperatura de contraste con el conservador de color ligero de Mark 7 Arterion



Mark 7 Arterion incluye accesorios para satisfacer sus necesidades clínicas específicas.

Doble pantalla Agrega una segunda pantalla para mayor flexibilidad operativa entre la sala del paciente y la sala de control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA:

Caudal:	0,1-45,0 ml/s en incrementos de 0,1 ml 0,1-59,9 ml/m en incrementos de 0,1 ml
Volumen:	1-150 ml en incrementos de 1 ml
Límite de presión (jeringa de 150 ml):	100-1200 psi en incrementos de 1 psi 689-8273 kPa en incrementos de 1 kPa
Tiempo de subida:	0,0-9,9 segundos en incrementos de 0,1
Tiempo de retraso:	0,0-99,9 segundos en incrementos 0,1
Velocidad de recarga:	1-20 ml/s
Volumen de llenado:	1-150 ml
Tamaño de la jeringa:	150 ml
Memoria de protocolo:	40 Protocolos
Historial de la memoria de inyección:	50 Inyecciones



Hand Controller

El controlador manual estéril VFlow™ de MEDRAD® está pensado para usarse con un único paciente.

- Caudal variable: Interruptor de control táctil (A) que permite el uso de inyecciones de caudal variable. Al presionar el interruptor del controlador aumenta el caudal de la inyección. Al soltarlo se reduce el caudal de la inyección.
- Caudal fijo: El controlador manual actúa como un interruptor de arranque; al soltar el dispositivo el flujo se interrumpe.

El sistema de inyección Mark 7 Arterion se comercializa para la administración de medios de contraste intravasculares y agentes de enjuague común durante los procedimientos angiográficos. Ver Información de usodel producto para información específica y completa de prescripción.

Para mayor información acerca de Mark 7 Arterion y para satisfacer sus necesidades específicas, póngase en contacto con su representante local de Bayer.



LCOAMKT.06.2011.70524

MATERIAL TÉCNICO/CIENTÍFICO DE USO EXCLUSIVO DEL CUERPO MÉDICO



Nosotros brindamos contraste.

Usted brinda una excepcional atención al paciente

MEDRAD Mark 7 Arterion™
Sistema de Inyección



Asa del cabezal

Para una maniobrabilidad más fácil

único sistema delantero

Para inserción simple y remoción limpia

16% más ligero

cabeza del inyector*

32% más ligero

Unidad del pedestal*
Fácil de mover

diseño de arco liso

para mayor alcance

interfase intuitiva

para un fácil control del inyector

20% menor superficie*

Mark 7 Arterion cuenta con una elegante ergonomía diseñada para su función; el sistema de pedestal con una superficie más pequeña es más ligero que la versión anterior de la marca MEDRAD, que incrementa su movilidad alrededor de su ocupado laboratorio. Y la cabeza más ligera ahora cuenta con una manija que facilita la posición para la inyección.

**en comparación con MEDRAD Mark V ProVis®

El sistema de inyección Mark 7 Arterion™ es lo más reciente en la serie "Mark" de inyector angiográficos de Bayer.


Mark 7 Arterion se beneficia de las más recientes tecnología haciéndolo más ligero*, manipulable y fácil de usar. Menos tiempo de posicionamiento e instalación del sistema Arterion significa más tiempo con el paciente. La interfase del usuario claramente visible e intuitiva lo guía por la instalación adecuada y destaca la información que necesita para realizar las inyecciones con confianza.

Único en el mercado, el sistema delantero de carga simplifica la instalación y contribuye con una desconexión más limpia. La Mark 7 Arterion brinda una visión clara del contraste. Con una base más pequeña, una cabeza más ligera y un brazo articulado flexible, el inyector puede llevarse a donde se necesite - incluso en ángulos.

Y por supuesto, puede seguir contando con lo que la marca MEDRAD siempre ha brindado: Equipo confiable con un extenso equipo de gente con alto capacitación lista para brindarle un excepcional servicio.



Fabricada con material ligero, la jeringa Mark 7 Arterion (Artículo de catálogo 700 SYR) le permite ver con facilidad el interior de la jeringa para monitorizar la purga de aire. Y los famosos puntos de fluido de la marca MEDRAD aún se encuentran ahí para ayudar - redondos para fluido, ovalados para aire.

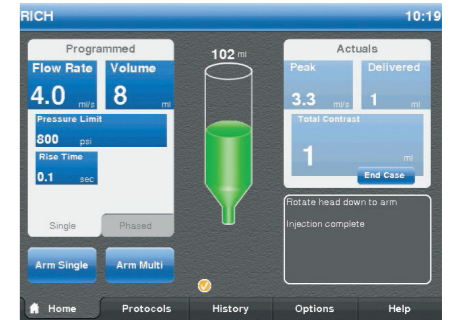

ESTADO DESACTIVADO

El estado activado le permite saber cuándo el sistema está listo para inyectar. La pantalla le permitirá acceder al protocolo, historial de las últimas inyecciones, cantidad de medio de contraste suministrado al paciente, Y almacenar protocolos en la memoria. (como se ve en la imagen del óvalo abajo)



ESTADO ACTIVADO

El estado activado destacado también le permite saber cuándo el sistema está listo para inyectar. Nuestras pantallas de historial y protocolo modificadas le permitirán acceder con facilidad a la cantidad de contraste suministrado al paciente y almacenar los protocolos de memoria.

